

～嘔吐物を処理する理想の機能～

『おうとケア』

吐いたものは
吸水ポリマーで
簡単にまとめて、
すばやくポイ！



③ **⑤** **④**

とめシール
※図4参照

↑ 最初にチャックが開いていることを必ずご確認ください

はな

(使用方法)

① 使用前にチャックが開いていることを必ずご確認ください


② パックの口を大きく開いてアゴをしっかりと入れて使用する

③ 使用後は速やかに手でチャック部分を閉じ、上部口からしっかりと丸める

④ 貼付してあるシールで丸めた部分をしっかりと留める

※注意：袋内に吸水ポリマーがこぼれている場合がありますが、使用中に問題ありません。吸水ポリマーは吸水力にすぐさま反応します。

おうとケア C10047 アイエスケー株式会社

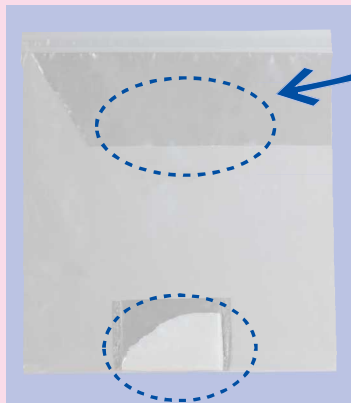

ポイント①
逆流防止弁付

吐物の跳ね返りや逆流を防ぐ

ポイント③ **上部にチャック**

上部にチャックを付けることで吐物と臭いを閉じこめる



ポイント②
吸水ポリマー投入済

水溶性のフィルムに入っているため溶けやすく、混ぜやすい

ポイント④
顔の挿入方向がはっきり

はなの印があることで、挿入方向がわかりやすい



ポイント⑤ **とめシール**
くるくる巻いた上部をとめる



『お子さまの とっさの嘔吐』

顔がすっぽり
寝ながらの嘔吐も
らくらく



気分の悪いお子さまに！！

包装	品番	価格	JANコード*	容量
2枚入 / 袋 × 5	C10047	1,800円	4517850002901	1,000ml
50枚入 / 袋	C10047-50	9,000円	4517850003007	



アイエスケー株式会社

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 4-9-12 TEL.03-3812-0191 FAX.03-3812-9284
 <URL> <http://www.isk-tokyo.co.jp/> <e-mail> yes@isk-tokyo.co.jp

