


Newマジック・カップ 《改良型・吸口4種交換式》 PAT. P

水から濃厚流動食まですべての流動食品に使える専用の水飲みカップ
 とっ手(別売品)をつけますと手の不自由な方が安心して摂取できます

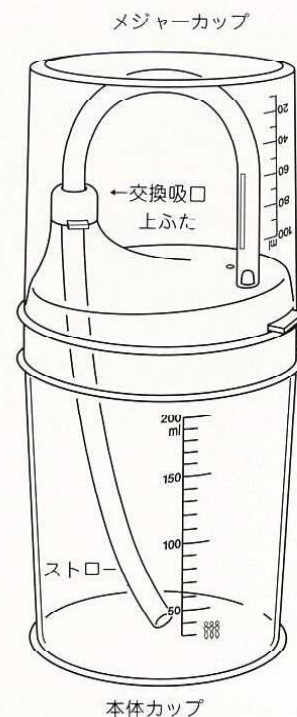

特長

- ❶ 水から三分粥まで使えます。
- ❷ 摂取物に応じて吸口を交換して使えます。
- ❸ メジャーカップ(100ml目盛付)兼用のキャップ付で衛生的です。
- ❹ 200mlの目盛がついているので摂取量が計れます。
- ❺ 咽頭部まで入れて飲ませる場合もストローを接続させて使用します。
- ❻ 指先で流量を調節ができます。
- ❼ 冷たい水を摂取する時は、カップ上ふたをはずしますと製氷ダイヤアイスが入れられます。

- 包装=10個入
- 別売品=
《ケア》用とっ手のみ:包装5個入

- 材質=ポリカーボネート(メジャーカップ・上ふた・本体カップ)・ポリエステルエラストマー(ノズル4種)
- 色=透明(ノズル4種・ストロー付) ■ 容量=200ml・目盛20cc刻み ■ 耐熱温度=135℃(本体カップのみ) ■ 重さ=110g
- 寸法=直径7cm×高さ15cm


カップの基本的な使い方

- ストローノズル吸口にストローを差込んで使用しますと便利です。摂取物を咽頭部まで入れる場合、(口内炎、口腔外科、歯肉炎、口腔内腫瘍など)もこの方法でご使用下さい。
- 自分で使う場合=普通のカップと同じ要領で使います。寝ている場合は流量調節孔に指をあて角度を適当にし流量を調節しながら使います。
- 看護者が介助する場合=指で孔を閉じてから吸口を挿入します。患者の様子をみながら徐々に孔を開き流量を調節しながら飲ませます。

状況に応じてノズルを交換します。

- 濃厚流動食用太口=ポタージュ、オートミール、おまじり、三分粥など
- 水分摂取用細口=スープ、果汁、水、茶など
- ミツ孔吸口=小児又は少量の場合
- ストローノズル吸口=水、果汁、お茶など

〔交換用吸口4種〕

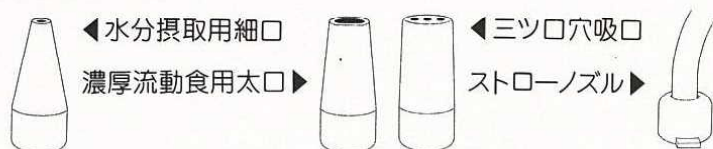

新製品のご案内(在宅介護用品) Newマジック・カップ《ケア》



■1個化粧箱入(吸口ノズル4種・ストロー・洗浄ブラシ・とっ手付)包装10個入